

Visitec® I-Ring® Pupilverwijder

De Visitec® I-Ring® Pupilverwijder is een eenvoudige, veilige en innovatieve oplossing voor intra-operatieve verwijding van kleine pupillen.

- Atraumatisch
- Uniforme pupilverwijding
- 6,3 mm gezichtsveld
- Gebruik met één hand
- Intuïtief voor chirurg en medewerkers
- Gemakkelijke plaatsing en verwijdering



Gaatjes voor veilige plaatsing

- Ontworpen om te verzekeren dat het Sinskeyhaakje niet in contact kan komen met de iris

Bewegende scharnieren

- Verbeteren van de flexibiliteit van de ring
- Betrouwbaar vouwen tijdens plaatsing en verwijdering
- Gemakkelijk te grijpen met de inserter

Kanalen

- De iris niet verstoren of erin knippen bij plaatsing of verwijdering
- Verticale stabiliteit bieden van het irisdiafragma
- Gemakkelijk bevestigen en losmaken



Eigenschappen en voordelen van de Visitec® I-Ring® Pupilverwijder

Atraumatisch

Ideaal ringmateriaal


- Polyurethaan – zacht maar veerkrachtig materiaal is zacht voor intra-oculair weefsel

Kanaal

- Vaste kanaalhoogte, dus geen samendrukken en inknippen van de iris tijdens plaatsing en verwijdering

Verbeterd comfort en gebruikersvriendelijk

- Bestemd om vlak te blijven in de voorste kamer en zo het cornea-endotheel te beschermen
- Omvat de iris geheel (360°) en elimineert spanningspunten

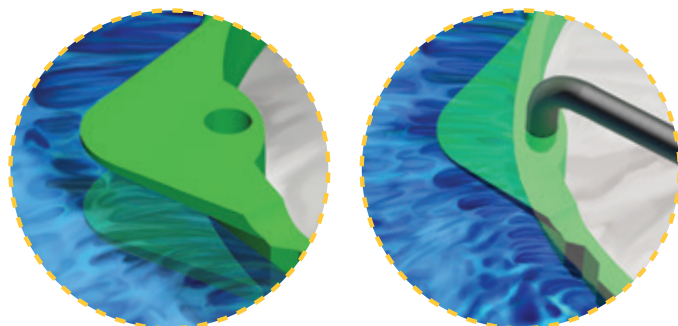


Gebruikersvriendelijk

Eenvoudig

- Plaatsing, bevestiging en verwijdering met één hand
- Minimale voorbereiding voor plaatsing door het chirurgisch team

Intuïtief

- Gemakkelijk bevestigen en weghalen in en uit de iris. Hierbij is slechts één Sinskeyhaakje nodig
- Groene kleur zorgt voor uitstekend contrast en uitstekende zichtbaarheid

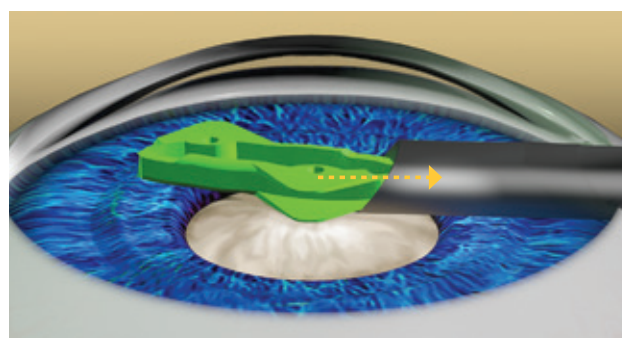


Snel

- Ontwerp en materiaal vergemakkelijken snelle plaatsing en verwijdering
- Snel aan te leren

Uniforme pupilverwijding

Continu contact

- Volledige (360°) irisbetrokkenheid geeft een werkgebied van 6,3 mm
- De vorm van de opening helpt bij het geleiden van de capsulorhexis

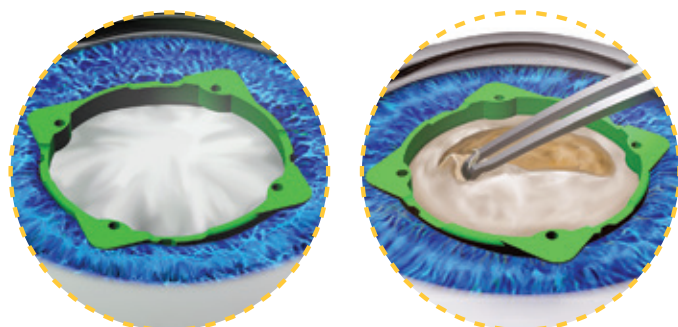

Beschrijving	Artikelnr.	Hoeve elheid
Visitec® I-Ring® Pupilverwijder, 1/EA, steriel eenmalig gebruik	587001	1
Visitec® I-Ring® Pupilverwijder, 6/pk, steriel eenmalig gebruik	587000	1

 **Beaver Visitec**

Beaver-Visitec International Ltd

Noordlaan 21, 9200 Dendermonde, Belgium

Tel. +32 52 280518

www.beaver-visitec.com

Amerikaans patent # 8,900,136. Aanvullende Amerikaanse en internationale patenten aangevraagd
BVI, het BVI-logo en alle andere handelsmerken zijn eigendom van Beaver-Visitec International (BVI) © 2015 BVI

590374-0715